

TV 2410NL

Funk-Empfänger mit
Induktionsschlinge

Récepteur radio avec
boucle d'induction

Ricevitore radio con
loop a induzione

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso



Übersicht

Aperçu


Riepilogo

Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr TV 2410NL.


Cette page dépliant vous offre un aperçu de votre TV 2410NL.

Questa pagina apribile Le mostra un riepilogo di tutto il Suo TV 2410NL.

Empfänger / Récepteur / Ricevitore

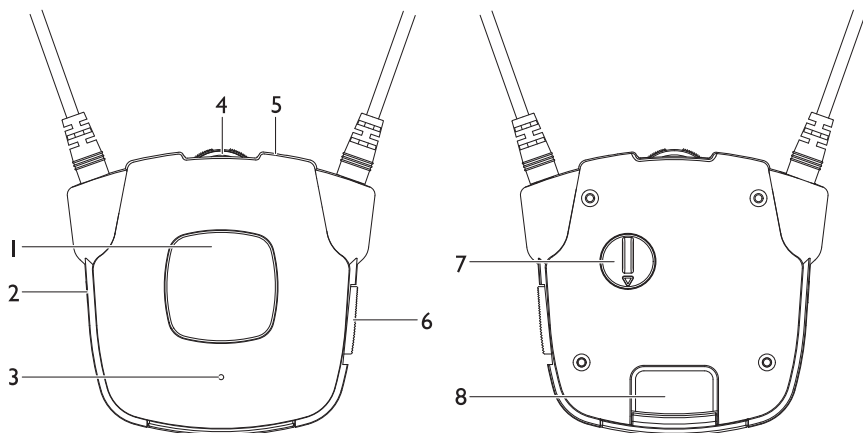

Sender / Emetteur / Emittente

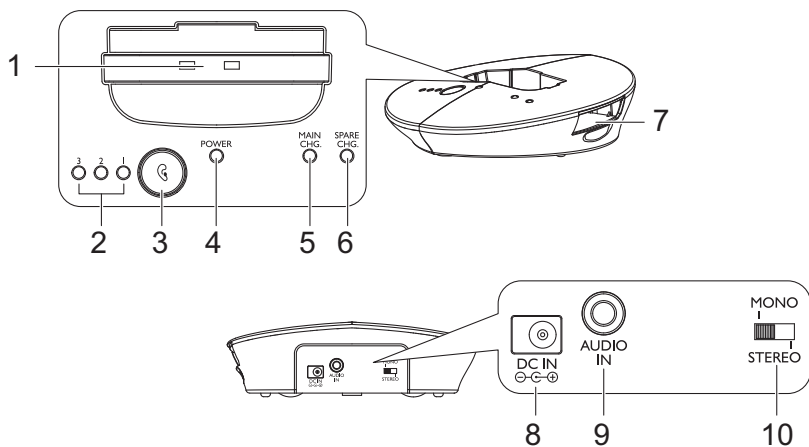

Empfänger

- 1 Mikrofontaste zum Hören von Geräuschen in der Umgebung
- 2 Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- 3 Mikrofon
- 4 Lautstärkeeinstellung
- 5 Betriebsanzeige
- 6 Ein-/Aus-Schalter
- 7 Balance (links/rechts)
- 8 Akku

Sender

- 1 Lademulde
- 2 Anzeige der eingestellten Sprachverständlichkeit
- 3 Taste für Einstellung der Sprachverständlichkeit
- 4 Betriebsanzeige
- 5 Ladeanzeige Empfänger
- 6 Ladeanzeige Ersatz-Akku
- 7 Einschub Ersatz-Akku
- 8 Anschluss für Netzgerät
- 9 Audio-Eingang (3,5 mm)
- 10 Mono/Stereo-Schalter

TV 2410NL in Betrieb nehmen

TV 2410NL in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

- 1 Empfänger mit Induktionsschleife
- 1 Sender
- 1 Netzteil für den Sender
- 2 Akkus für den Empfänger (Lithium Polymer)
- 1 Audiokabel (2 x 3,5 mm Klinkenstecker)
- 1 Audioadapter (RCA)
- 1 Scart-Adapter
- 1 6,3 mm / 3,5 mm Adapter
- 1 Mikrofon mit Adapter und Mikrofonhalter incl. Befestigungsmaterial
- 1 Bedienungsanleitung


Wichtig: Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise auf Seite 12, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Sender anschließen

- 1 Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit der Anschlussbuchse an der Rückseite des Senders.
- 2 Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 3 Verbinden Sie den Sender mit Ihrer gewünschten Tonquelle.

Für die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten (Fernsehgerät, Stereo-Anlage etc.) sind im Lieferumfang mehrere Adapter sowie ein Mikrofon vorhanden, das Sie vor dem Lautsprecher befestigen können.


Die grüne Betriebsanzeige blinkt, sobald die Netzspannung vorhanden ist und leuchtet konstant, wenn das Signal einer Tonquelle erkannt wurde.

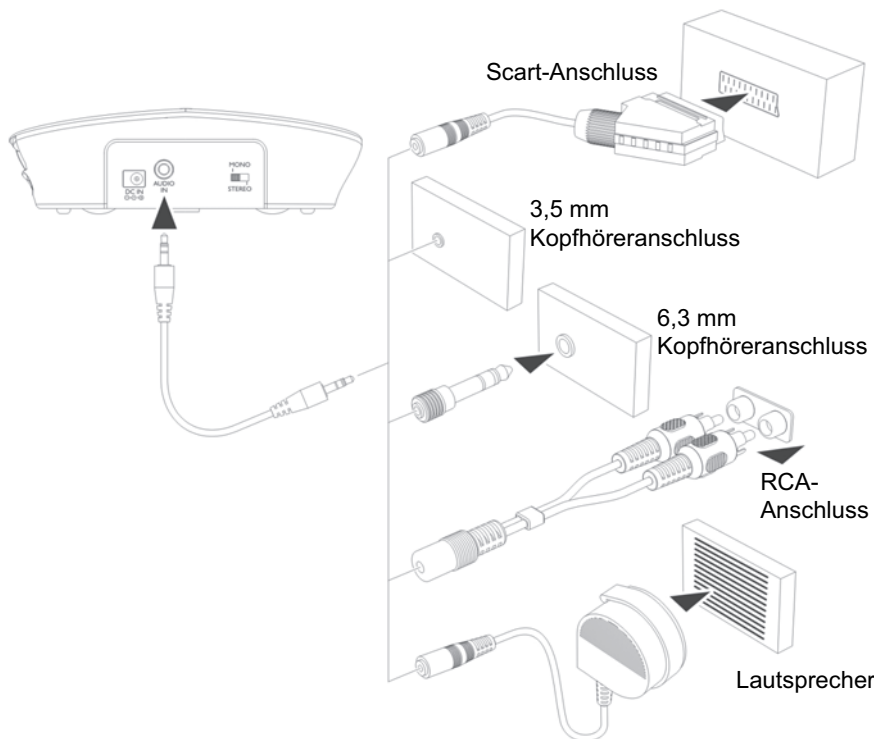


Empfänger in Betrieb nehmen

Akku einlegen und laden

- 1 Stecken Sie einen Akku in das Akkufach. Achten Sie auf die korrekte Polung.

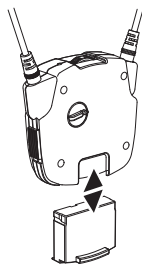

- 2 Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch.
Schalten Sie ggf. den Empfänger aus (Stellung OFF).
Stellen Sie den Empfänger wie abgebildet in die Ladeablage im Sender. Die Ladeanzeige (5) leuchtet rot während der Akku geladen wird (ca. 3 Stunden). Ist der Akku voll geladen, leuchtet die Ladeanzeige grün.

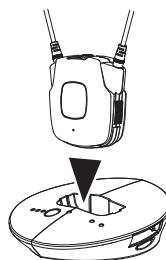

- 3 Schieben Sie den Ersatz-Akku wie abgebildet in das Ladefach am Sender. Die Ladeanzeige (6) leuchtet rot während der Akku geladen wird (ca. 3 Stunden). Ist der Akku voll geladen, leuchtet die Ladeanzeige grün.



- Ein voll geladener Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 5 Stunden.
- Um Akkukapazität zu sparen wird der Empfänger automatisch ausgeschaltet, wenn für ca. 5 Minuten kein Signal vom Sender empfangen wird oder der Signalpegel zu niedrig ist. Sobald das Signal wieder die notwendige Stärke erreicht hat, schaltet sich der Empfänger automatisch wieder ein.


Zusätzlicher Kopfhörer-Anschluss am Empfänger

Am seitlichen Kopfhöreranschluss können Sie einen handelsüblichen Ohr-/Kopfhörer (3,5 mm-Klinkenstecker) einstecken.

Bitte beachten Sie, dass bei einem eingesteckten Ohr-/Kopfhörer die Induktionsschleife abgeschaltet wird.

Zusätzliches Mikrofon

Wenn das Gerät, von dem Sie den Ton über den TV 2410NL hören wollen, keinen Audio-Ausgang hat, können Sie das beiliegende Mikrofon verwenden.

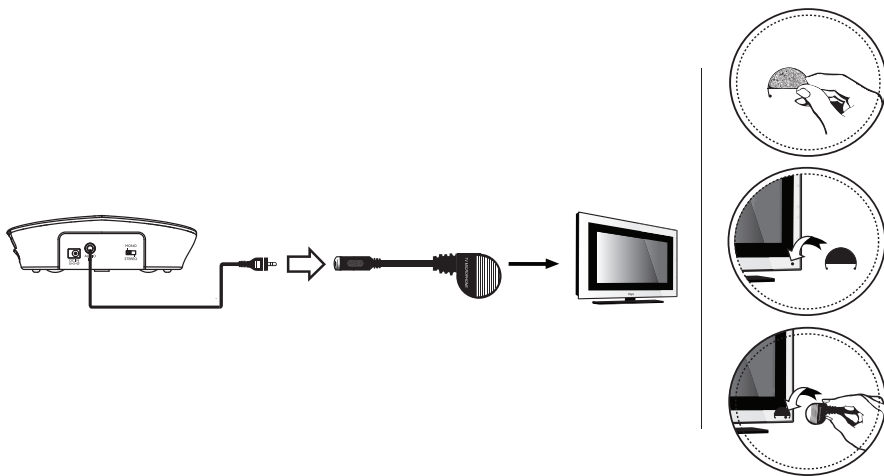

- 1 Verbinden Sie das Audio-Kabel mit dem Mikrofon.
- 2 Befestigen Sie den Mikrofonhalter mit dem Klebestreifen direkt am Lautsprecher des Fernsehers oder der Stereoanlage. Stecken Sie das Mikrofon in den Mikrofonhalter.
- 3 Bitte stellen Sie anfangs eine sehr geringe Lautstärke am Fernseher/an der Stereoanlage ein und regeln Sie die erforderliche Lautstärke zusammen mit der Lautstärkeeinstellung am Empfänger. Die Position des

Mikrofons hat entscheidenden Einfluss auf die Lautstärke - ermitteln Sie die beste Position durch Probieren.

Hinweis: Beim Betrieb mit dem Mikrofon ist nur Mono-Empfang möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass sich das Mikrofon nicht zu nahe am Sender befindet, da es sonst zu Störgeräuschen im Kopfhörer kommen kann.

Bedienung

Bedienung

Lautes Hören schädigt das Gehör!

- **Stellen Sie vor dem Aufsetzen eine niedrige Lautstärke am Hörer ein und erhöhen Sie dann die Lautstärke Ihren Anforderungen entsprechend.**
- **Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.**

- 1 Schalten Sie das Gerät, von dem Sie den Ton hören wollen, ein. Die grüne Betriebsanzeige am Sender leuchtet.
- 2 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter am Empfänger in die Position „ON“.
- 3 Die Induktionsschleife am Empfänger überträgt die Signale zu Ihrem Hörgerät (**Achtung:** Es darf kein Ohr-/Kopfhörer am seitlichen Anschluss des Empfängers eingesteckt sein.).
- 4 Ändern Sie ggf. die Klangeinstellung nach Ihren Bedürfnissen.

Hinweis: Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie 3 kurze Pieptöne im Minutenabstand im Hörer. Der Empfänger wird nach ca. 5 Minuten automatisch abgeschaltet.

Die Mikrofontaste


Die seitliche Mikrofonöffnung am Empfänger nimmt die Geräusche aus Ihrer Umgebung auf. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, hören Sie Ihre Umgebung lauter. Sie können also beispielsweise Ihre Türklingel, Ihr Telefon oder Ihren Gesprächspartner auch lauter hören, wenn Sie den Empfänger tragen.

Um das Mikrofon einzuschalten drücken Sie die Mikrofon-Taste. Die Betriebsanzeige wechselt von grün zu rot und Sie hören zwei kurze Pieptöne. Achten Sie darauf, dass die seitliche Mikrofonöffnung nicht abgedeckt ist. Sie hören Ihre Umgebung und können den Empfänger als Hörverstärker verwenden, um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen.

Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste noch einmal. Die Betriebsanzeige wechselt wieder zu grün und Sie hören den Ton Ihres Fernsehers bzw. Radios ö. ä.

Einstellung der Sprachverständlichkeit

Die Sprachverständlichkeit können Sie am Sender einstellen. Durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Taste (siehe Abbildung) leuchten die Anzeige-LEDs 1, 2, 3 oder keine.

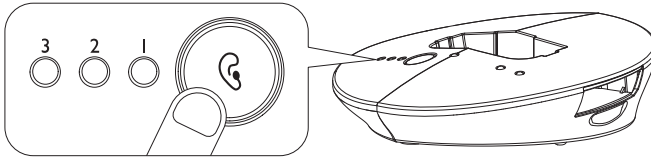

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen. Probieren Sie, welche Einstellung Sie bevorzugen.

Einstellung	LED-Anzeige (orange)	Effekt
Standard		Neutral
1		Anhebung der Bässe + Anhebung der Höhen
2		Anhebung der Höhen
3		Anhebung der Bässe

Stereo- / Mono-Schalter am Sender

Die Wiedergabe im Empfänger ist immer Mono, auch wenn das Ausgangssignal der Quelle Stereo ist. Sollen beide Stereokanäle gleichermaßen wiedergegeben werden, stellen Sie den Schalter am Sender in die Stellung "Mono" (empfohlene Einstellung). Möchten Sie stattdessen nur einen der beiden Stereokanäle hören, stellen Sie den Schalter am Sender in die Stellung "Stereo" und justieren Sie die Wiedergabe mit dem Balance-Regler am Empfänger.

Fehlersuche

Kein Ton

- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Senders an das Stromnetz (Steckernetzgerät - Anschluss am Sender).
- Kontrollieren Sie den Schalter am Empfänger (Stellung ON).
- Möglicherweise ist der Akku im Empfänger entladen. Stellen Sie den Empfänger zum Laden in die Ladeablage am Sender oder tauschen Sie den Akku gegen den (geladenen) Reserveakku aus.
- Prüfen Sie, ob das Gerät, von dem Sie den Ton hören wollen (Radio, Fernsehgerät etc.), eingeschaltet ist und gegenwärtig tatsächlich ein Sender/Kanal eingestellt ist, der einen Ton sendet.
- Wenn Sie das Tonsignal für den Sender aus einem Kopfhöreranschluss am Radio/CD-Spieler etc. abnehmen, prüfen Sie bitte, ob dieser Ausgang über einen Lautstärkeregler gesteuert wird. Drehen Sie ggf. diese Ausgangslautstärke höher.
- Die am Empfänger eingestellte Lautstärke ist zu niedrig. Stellen Sie eine höhere Lautstärke ein.
- Versuchen Sie einen anderen Anschluss (RCA, SCART oder HEADPHONE) oder verwenden Sie das mitgelieferte Mikrofon.

Störgeräusche

- Möglicherweise ist der Akku im Empfänger entladen. Stellen Sie den Empfänger zum Laden in die Ladeablage am Sender oder tauschen Sie den Akku gegen den (geladenen) Reserveakku aus.
- Möglicherweise ist die Entfernung des Empfängers zum Sender zu groß. Probieren Sie aus, ob die Qualität besser wird, wenn Sie näher am Sender sind.
- Wenn Sie das Tonsignal für den Sender aus einem Kopfhöreranschluss am Radio/CD-Spieler etc. abnehmen, prüfen Sie bitte, ob dieser Ausgang über einen Lautstärkeregler gesteuert wird. Drehen Sie ggf. diese Ausgangslautstärke höher.
- Das Eingangssignal ist möglicherweise zu laut. Verringern Sie die Lautstärke des Eingangssignals.

Anhang

Anhang

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Tonsignale eines Fernsehers oder einer HiFi-Anlage vom Sender kabellos an einen Empfänger zu übertragen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie die Geräte in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort und Sicherheitsinformationen

- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Da die heutigen Möbel mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, ist es nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe die Kunststoff-Füße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Verwenden Sie daher für Ihr Gerät bitte eine rutschfeste Unterlage.
- Der Empfänger ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken wiederzugeben. Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus. Stellen Sie anfangs eine niedrige Lautstärke am Empfänger ein und erhöhen Sie dann die Lautstärke Ihren Anforderungen entsprechend.

Benutzer mit Herzschrittmacher

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Das Gerät muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile den Sender beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Achten Sie beim Betrieb auf den einwandfreien Zustand der Kabel und Stecker. Abgeknickte oder durchgescheuerte Kabel sind lebensgefährlich!

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG).

Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.



- Energiesparend
- Économisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur die für das Gerät vorgeschriebenen Akkus! Achten Sie auf die richtige Polung!

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.



Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen.

Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die Hinweise auf der Seite 10. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Technische Daten

Übertragung	Digital hopping
Frequenz	2,4 GHz ISM Band
Reichweite	bis zu 25 m (bei optimalen Bedingungen)
Frequenzbereich	30 Hz - 20 kHz
Max. Lautstärke	120 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Signal/Rausch-Abstand	> 75 dB
Stromversorgung (Sender)	Netzteil, Ausgang 5 VDC, 550 mA
Stromversorgung (Empfänger)	Akku 3,7 V / 350 mA Lithium Polymer
Betriebsdauer	Mit vollem Akku bis zu 5 Stunden
Ladezeit	Für leere Akkus ca. 3 Stunden
Gewicht Empfänger	78 g
Gewicht Sender	115 g

Garantie

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantiespruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Notizen

Récepteur

- 1 Touche microphone pour entendre les bruits environnants
- 2 Raccord pour casque (3,5 mm)
- 3 Microphone
- 4 Réglage du volume
- 5 Voyant de service
- 6 Bouton On/Off
- 7 Balance (gauche/droite)
- 8 Accumulateur

Emetteur

- 1 Base de chargement
- 2 Affichage de la clarté de parole réglée
- 3 Touche de réglage de la clarté de parole
- 4 Voyant de service
- 5 Voyant de chargement du récepteur
- 6 Voyant de chargement Accumulateur de rechange
- 7 Insertion Accumulateur de rechange
- 8 Raccordement pour bloc d'alimentation
- 9 Entrée audio (3,5 mm)
- 10 Bouton mono/stéréo

Mise en service

TV 2410NL

Mise en service TV 2410NL

Contenu de l'emballage

- 1 Récepteur avec boucle d'induction
- 1 émetteur
- 1 bloc d'alimentation pour l'émetteur
- 2 accus pour le récepteur (lithium polymère)
- 1 câble audio (2 fiches jack de 3,5 mm)
- 1 adaptateur audio (RCA)
- 1 adaptateur Scart
- 1 adaptateur 6,3 mm / 3,5 mm
- 1 microphone avec adaptateur et support microphone, fixation incluse
- 1 mode d'emploi

Important : veuillez lire d'abord les indications de sécurité page 30 avant de mettre l'appareil en service.

Raccorder l'émetteur


1 Connectez la fiche du bloc d'alimentation et la prise de raccordement au dos de l'émetteur.

2 Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant.

3 Connectez l'émetteur à votre source de son souhaitée.

Pour les différents raccordements possibles (téléviseur, chaîne hifi etc.), la livraison comprend plusieurs adaptateurs ainsi qu'un microphone que vous pouvez fixer devant le haut-parleur.



Le voyant de service vert clignote dès que l'appareil est sous tension de secteur et brille en permanence si le signal d'une source de son est reconnu.

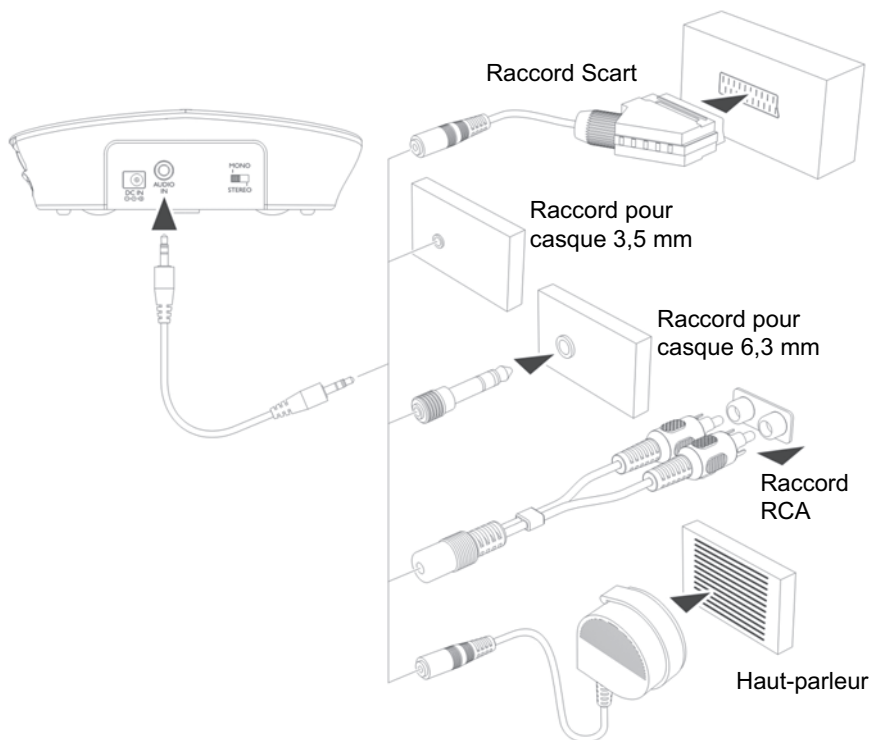

Mettre le récepteur en marche

Insérer et charger les accumulateurs

- 1 Insérez un accumulateur dans le compartiment à cet effet. Respectez la bonne polarité.
- 2 Chargez l'accumulateur avant la première utilisation.
Le cas échéant, éteignez le récepteur (position OFF).
Placez comme illustré le récepteur dans le support de chargement situé dans l'émetteur. Le voyant de chargement (5) brille en rouge pendant le chargement de l'accum (env. 3 heures). Quand l'accu est complètement chargé, le voyant brille en vert.
- 3 Poussez comme illustré l'accu de rechange dans le compartiment de chargement de l'émetteur. Le voyant de chargement (6) brille en rouge pendant le chargement de l'accu (env. 3 heures). Quand l'accu est complètement chargé, le voyant brille en vert.

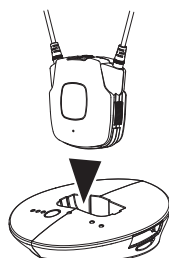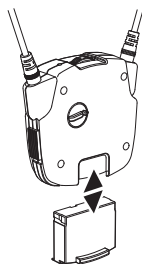

- **Un accumulateur complètement chargé offre jusqu'à 5 heures de fonctionnement.**
- **Pour économiser la capacité de l'accumulateur, le récepteur est désactivé automatiquement quand aucun signal n'est reçu de l'émetteur pendant env. 5 minutes ou quand le niveau de signal est trop faible. Dès que le signal a de nouveau la puissance nécessaire, le récepteur se réactive automatiquement.**


Raccord supplémentaire pour casque sur le récepteur

Vous pouvez brancher un casque/des écouteurs de type usuel (jack de 3,5 mm) sur le raccord latéral pour casque.

Veuillez noter que la boucle d'induction est désactivée lorsqu'un casque/des écouteurs est (sont) branché(s).

Microphone supplémentaire

Quand l'appareil, dont vous souhaitez entendre le son par l'intermédiaire du TV 2410NL, n'a aucune sortie audio, vous pouvez utiliser le microphone joint dans la livraison.

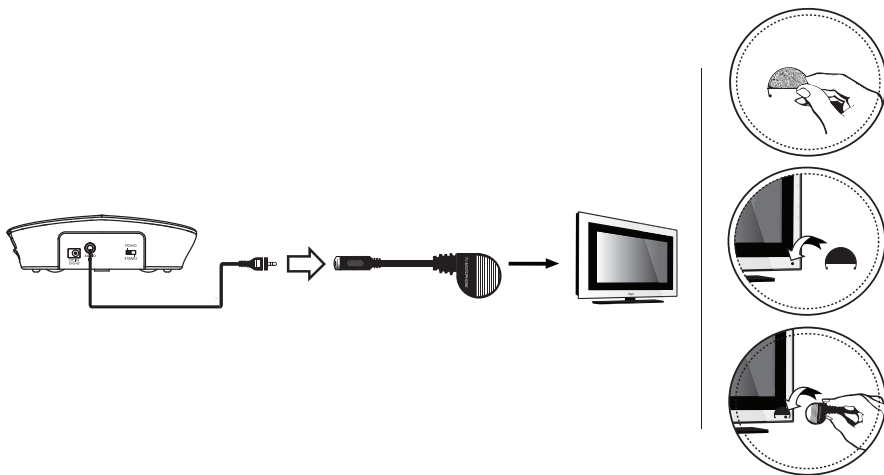

- 1 Connectez le câble audio avec le microphone.
- 2 Fixez le support pour microphone directement sur le haut-parleur du téléviseur ou de la chaîne hifi à l'aide des bandes adhésives. Branchez le microphone dans le support pour microphone.
- 3 Réglez d'abord un très faible volume sonore sur la télévision/la chaîne stéréo, puis réglez le volume nécessaire avec le réglage du volume sur le récepteur. La position du microphone a une influence décisive sur le volume. Déterminez la meilleure position par des tentatives.

Remarque : le microphone ne permet que la réception en mono.

Veillez à ce que le microphone ne se situe pas trop près de l'émetteur, car des parasites pourraient survenir dans le casque.

Utilisation

Utilisation

L'écoute à volume élevé nuit à l'audition !

- Réglez un faible volume sonore sur l'écouteur avant de mettre en place ce dernier et augmentez ensuite le volume sonore en fonction de vos exigences.
- Ne vous soumettez pas constamment à un volume élevé.

- 1 Allumez l'appareil dont vous souhaitez entendre le son. Le voyant de service vert de l'émetteur brille.
- 2 Poussez le bouton On/Off du récepteur en position « ON ».
- 3 La boucle d'induction du récepteur transmet les signaux vers votre appareil auditif (**attention** : aucun casque/écouteur ne doit être branché sur le raccord latéral du récepteur).
- 4 Le cas échéant, modifiez le réglage du son en fonction de vos besoins.
Remarque : quand l'accu est presque vide, vous entendez 3 bips courts dans l'écouteur par intervalles d'une minute. Le récepteur est éteint automatiquement après env. 5 minutes.

La touche du microphone

L'ouverture latérale du microphone du récepteur recueille les bruits dans votre environnement. Quand le microphone est activé, vous entendez votre environnement avec un volume plus élevé. Vous pouvez donc entendre par exemple votre sonnerie de porte, votre téléphone ou votre interlocuteur, même si vous portez le récepteur.


Pour activer le microphone, appuyez sur la touche microphone. Le voyant de service passe du vert au rouge et vous entendez deux bips courts. Veillez à ne pas couvrir l'ouverture latérale du microphone. Vous entendez votre environnement et pouvez utiliser le récepteur comme amplificateur d'écoute pour mieux comprendre votre interlocuteur.

Pour désactiver le microphone, appuyez sur la touche encore une fois. Le

voyant de service repasse au vert et vous entendez le son de votre téléviseur ou de votre radio, entre autres.

Réglage de la clarté de parole

Vous pouvez régler la clarté de parole. Par pression répétée de la touche (voir illustration), la LED d'affichage 1, 2, 3 brille ou aucune ne brille.

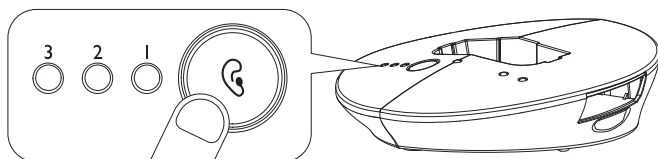

Les réglages possibles sont indiqués dans le tableau suivant. Procédez par tentatives pour trouver votre réglage préféré.

Réglage	Affichage à LED (orange)	Effet
Standard		Neutre
1		Augmentation des basses + Augmentation des aigus
2		Augmentation des aigus
3		Augmentation des basses

Commutateur stéréo/mono sur l'émetteur

La restitution sur le récepteur est toujours en mono, même si le signal de sortie de la source est en stéréo. Si les deux canaux stéréo doivent être restitués de la même façon, réglez le commutateur de l'émetteur en position « mono » (réglage recommandé). Si, au lieu de cela, vous souhaitez n'entendre qu'un des deux canaux stéréo, réglez le commutateur de l'émetteur en position « stéréo » et ajuster la restitution avec le régleur de balance du récepteur.

Recherche de défauts

Aucun son

- Vérifiez si l'émetteur est raccordé correctement au réseau électrique (raccordement du bloc d'alimentation sur l'émetteur).
- Contrôlez l'interrupteur du récepteur (position ON).
- Il est possible que l'accumulateur du récepteur soit déchargé. Placez le récepteur à charger dans la station de chargement de l'émetteur ou remplacez l'accumulateur par un accumulateur de réserve (chargé).
- Vérifiez si l'appareil dont vous souhaitez entendre le son est allumé (radio, téléviseur etc.) et si actuellement un émetteur/canal, qui émet un son, est effectivement réglé.
- Si vous recevez le signal du son de l'émetteur à partir d'un raccordement pour casque sur la radio/le lecteur de CD etc., vérifiez si cette sortie est commandée par un régleur de volume. Le cas échéant, augmentez ce volume de sortie.
- Le volume réglé sur le récepteur est trop bas. Réglez un volume plus élevé.
- Essayez un autre raccord (RCA, SCART ou HEADPHONE) ou utilisez le microphone livré.

Parasites

- Il est possible que l'accumulateur du récepteur soit déchargé. Placez le récepteur à charger dans la station de chargement de l'émetteur ou remplacez l'accumulateur par un accumulateur de réserve (chargé).
- Il est possible que le récepteur soit trop éloigné de l'émetteur. Vérifiez si la qualité est meilleure en vous rapprochant de l'émetteur.
- Si vous recevez le signal du son de l'émetteur à partir d'un raccordement pour casque sur la radio/le lecteur de CD etc., vérifiez si cette sortie est commandée par un régleur de volume. Le cas échéant, augmentez ce volume de sortie.
- Le signal d'entrée est peut-être trop élevé. Baissez le volume du signal d'entrée.

Annexe

Annexe

Indications de sécurité

Lisez ce mode d'emploi entièrement avec soin et conservez-le bien.

Utilisation conforme aux dispositions

Cet appareil a été développé pour transmettre les signaux sonores d'un téléviseur ou d'une chaîne hifi de l'émetteur à un récepteur au moyen d'une lumière infrarouge et sans câble. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme aux dispositions. Les modifications ou transformations d'un propre gré sont interdites. N'ouvrez les appareils en aucun cas et n'essayez pas de les réparer vous-même.

Lieu d'installation et informations relatives à la sécurité

- Évitez les nuisances causées par la fumée, la poussière, les secousses, les produits chimiques, l'humidité, la chaleur ou un ensoleillement direct.
- Les meubles d'aujourd'hui étant revêtus d'une immense variété de laques et de matières synthétiques et traités avec différents produits d'entretien de la laque, il ne peut pas être exclu que certaines de ces substances attaquent et ramollissent les pieds en plastique de l'appareil. Les pieds de l'appareil ainsi modifiés peuvent laisser des traces désagréables à la surface des meubles. Par conséquent, utilisez une base antidérapante pour votre appareil.
- Le récepteur est capable de restituer des volumes très élevés. Ne vous soumettez pas constamment à un volume élevé. Réglez un faible volume sonore sur l'émetteur avant de mettre en place ce dernier et augmentez ensuite le volume sonore en fonction de vos exigences.

Utilisateurs munis d'un stimulateur cardiaque

Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit. Eteindre immédiatement l'appareil, si vous sentez ou supposez des altérations quelconques.

Appareil d'alimentation

Attention : utilisez seulement le bloc d'alimentation livré, car d'autres blocs d'alimentation peuvent endommager le système de surveillance. Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.

Veillez à l'état parfait des câbles et des fiches. Les câbles pliés ou élimés sont très dangereux !

Le bloc d'alimentation livré répond aux exigences de l'Union européenne en matière d'éco-conception (directive 2005/32/CE).



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Cela signifie que, tant en service qu'au repos, la consommation électrique est nettement plus faible par rapport aux blocs d'alimentation de modèles plus anciens.

Accumulateurs

Attention : ne jetez pas les accumulateurs ou les piles dans le feu. Utilisez seulement les piles ou les accumulateurs prescrits pour l'appareil ! Veillez à respecter la bonne polarité !

Élimination des déchets

Si vous souhaitez éliminer votre appareil, apportez-le au centre de collecte de votre commune en charge de l'élimination des déchets (par exemple : déchetterie). Selon la loi sur les appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont dans l'obligation de séparer les vieux appareils électriques et électroniques et les autres déchets. Le symbole ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter l'appareil dans les ordures ménagères !



Mise en danger de la santé et de l'environnement par les accumulateurs et les piles !



Ne pas ouvrir, endommager, ingérer les accumulateurs et les piles ou les laisser accéder à l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

Vous êtes dans l'obligation d'éliminer en toute sécurité les accumulateurs et les piles dans le commerce distributeur de piles ainsi qu'au près de centres de collecte compétents, qui mettent des bacs correspondants à votre disposition. L'élimination des déchets est gratuite.

Les symboles ci-après signifient que vous ne devez en aucun cas jeter les accumulateurs et les piles dans les ordures ménagères et ceux-ci doivent être recyclés via des centres de collecte.

Les matériaux d'emballage sont à éliminer selon les consignes locales.

Hotline du service-clients

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, contrôlez tout d'abord les indications de la page 28. En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site internet : **www.amplicomms.com**
Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

Déclaration de conformité



Cet appareil répond aux exigences de la directive UE :

Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité avec la directive citée ci-avant est confirmée par le marquage CE apposé sur cet appareil.

Pour obtenir la déclaration de conformité complète, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site internet : **www.amplicomms.com**

Indications d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et sans peluche.
- N'utilisez aucun nettoyeur ni solvant.

Caractéristiques techniques

Transmission	Digital hopping
Fréquence	2,4 GHz ISM Band
Portée	jusqu'à 25 m (dans des conditions optimales)
Plage de fréquences	30 Hz - 20 kHz
Volume max.	120 dB
Facteur de distorsion	< 0,5 %
Rapport signal/bruit	> 75 dB
Alimentation électrique (émetteur)	Bloc d'alimentation, sortie : 5 V DC, 550 mA
Alimentation électrique (récepteur)	1 pile rechargeable 3,7 V / 350 mA Lithium Polymer
Durée de fonctionnement	Avec accu plein : jusqu'à 5 heures
Durée de chargement	Pour accu vide : env. 3 heures
Poids	Émetteur : env. 115 g Récepteur : env. 78 g

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie.

La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.

Notes

Ricevitore

- 1 Tasto del microfono per ascoltare rumori nell'ambiente
- 2 Collegamento per cuffie (3,5 mm)
- 3 Microfono
- 4 Impostazione volume
- 5 Indicazione di funzionamento
- 6 Dispositivo di accensione / spegnimento
- 7 Equilibrio (sinistro/destro)
- 8 Accumulatore

Emittente

- 1 Ciotola di ricarica
- 2 Indicazione della comprensione linguistica impostata
- 3 Tasto impostazione della comprensione linguistica
- 4 Indicazione di funzionamento
- 5 Indicazione di carica ricevitore
- 6 Indicazione batteria sostitutiva
- 7 Inserimento batteria sostitutiva
- 8 Collegamento per adattatore
- 9 Entrata audio (3,5 mm)
- 10 Interruttore mono / stereo

Mettere in funzione TV 2410NL

Mettere in funzione TV 2410NL

Contenuto del pacchetto


- 1 ricevitore con loop a induzione
- 1 emittente
- 1 adattatore per un emittente
- 2 batterie per il ricevitore (litio polimerico)
- 1 cavo audio (2 x 3,5 mm presa con maniglia)
- 1 adattatore audio (RCA)
- 1 adattatore scart
- 1 6,3 mm / 3,5 mm adattatore
- 1 microfono con adattatore e supporto microfono incluso materiale di fissaggio
- 1 manuale d'istruzioni

Importante: Legga innanzitutto le istruzioni di sicurezza a pagina 48, prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Collegare l'emittente

- 1 Colleghi la presa dell'adattatore con la scatola di collegamento sul retro dell'emittente.
- 2 Inserisca l'adattatore in una presa.
- 3 Colleghi l'emittente con la Sua fonte di tono desiderata.
Per le diverse possibilità di collegamento (apparecchio televisivo, impianto stereo, ecc.) nel volume di consegna sono disponibili diversi adattatori e un microfono da fissare davanti all'altoparlante.

L'indicazione verde di funzionamento lampeggia in presenza della tensione di rete e si illumina in modo costante quando è stato riconosciuto il segnale di una fonte di tono.

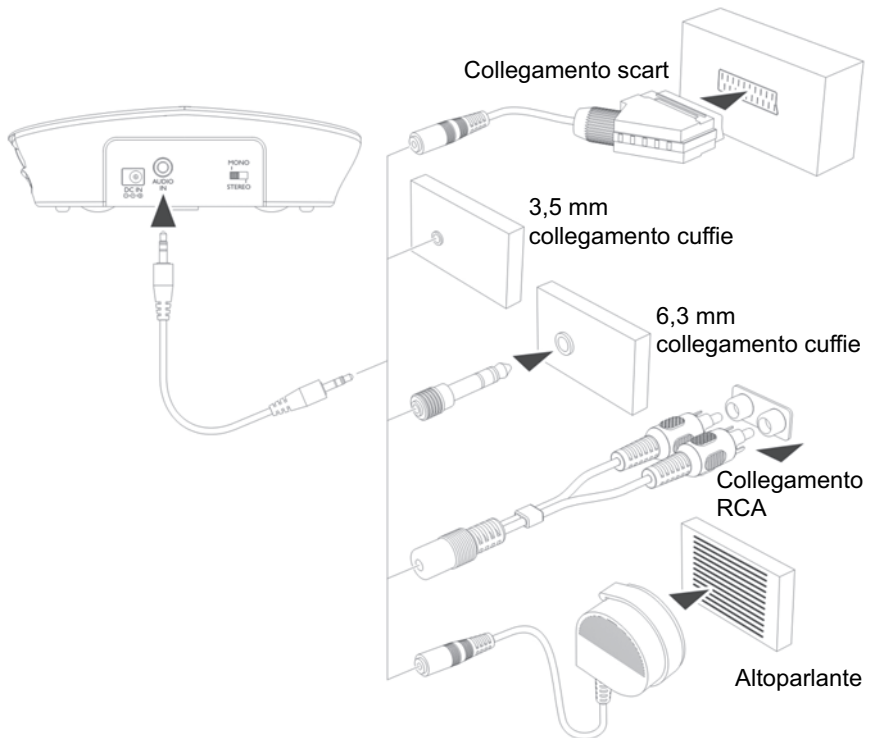


Mettere in funzione il ricevitore

Inserire la batteria e caricarla

- 1 Inserisca una batteria nel comparto delle batterie.


Faccia attenzione alla polarità corretta.

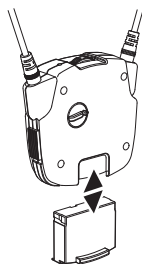

- 2 Ricarichi la batteria prima del primo uso.

Spegna eventualmente il ricevitore (posizione OFF).

Posizioni il ricevitore nella ciotola di ricarica all'interno dell'emittente come rappresentato nell'immagine. L'indicazione della ricarica (5) lampeggia in rosso mentre si ricarica la batteria (3 ore circa). Quando la batteria è completamente carica, l'indicazione di ricarica lampeggia in verde.

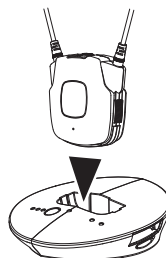

- 3 Inserisca la batteria sostitutiva nel comparto di ricarica sull'emittente come rappresentato nell'immagine. L'indicazione della ricarica (5) lampeggia in rosso mentre si ricarica la batteria (3 ore circa). Quando la batteria è completamente carica, l'indicazione di ricarica lampeggia in verde.



- Una batteria completamente ricaricata permette una durata di funzionamento di fino a 5 ore.
- Per risparmiare la capacità della batteria, il ricevitore si spegne automaticamente se per 5 minuti circa non riceve nessun segnale dall'emittente o se il livello acustico del segnale è troppo basso. Non appena il segnale raggiunge nuovamente la potenza necessaria, il ricevitore si riaccende automaticamente.


Collegamento supplementare per cuffie sul ricevitore

Nella presa laterale per cuffie è possibile inserire degli auricolari o cuffie (connettore jack da 3,5 mm) d'uso commerciale.

Accertarsi che il loop a induzione sia disattivato in caso di inserimento di auricolari/cuffie.

Microfono aggiuntivo

Se l'apparecchio dal quale desidera sentire il tono mediante TR 2410NL non ha un'uscita audio, può utilizzare il microfono fornito.

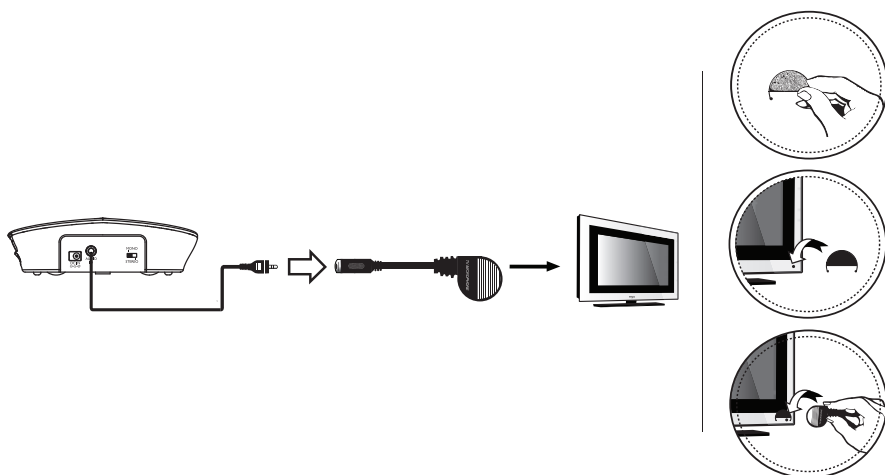

- 1 Colleghi il cavo audio con il microfono.
- 2 Fissi il supporto del microfono con l'adesivo direttamente sull'altoparlante della TV o dell'impianto stereo. Inserisca il microfono nel supporto del microfono.
- 3 Impostare inizialmente un volume molto basso sul televisore/impianto stereo e regolarne l'intensità necessaria di pari passo con la regolazione del volume sul ricevitore. La posizione del microfono esercita un'influenza decisiva sul volume – determini la posizione migliore facendo dei ten-

tativi. **Avviso:** Con il funzionamento con microfono è possibile solo la ricezione mono.

La preghiamo di fare attenzione al fatto che il microfono non si trovi troppo vicino all'emittente visto che altrimenti si potrebbero avere rumori di interferenza nella cuffia.

Uso

Uso

Un volume troppo alto danneggia l'udito!

- Prima di posizionarlo, regolare il volume del ricevitore e aumentarlo poi in base alle proprie esigenze.
- Non esporsi costantemente ad un volume elevato.

- 1 Accenda l'apparecchio dal quale desidera sentire il tono. L'indicazione di funzionamento verde sull'emittente si illumina.
- 2 Spingere l'interruttore di accensione/spegnimento sul ricevitore in posizione "ON".
- 3 Il loop a induzione sul ricevitore trasmette il segnale al proprio apparecchio acustico (**attenzione:** sulla presa laterale del ricevitore non devono essere inseriti né auricolari, né cuffie.).
- 4 Modifichi eventualmente l'impostazione del suono secondo le Sue esigenze. **Avviso:** Quando la batteria è quasi scarica, sente 3 brevi toni bip nella cornetta ad intervalli di un minuto. Il ricevitore si spegne automaticamente dopo circa 5 minuti.


Il tasto del microfono

L'apertura laterale del microfono del ricevitore registra i rumori dal Suo ambiente. Attivando il microfono, i suoni ambientali vengono percepiti con maggiore intensità. Il campanello della porta, il telefono o il proprio interlocutore, per fare un esempio, si sentono, quindi, meglio se si indossa il ricevitore. Per accendere il microfono preme il tasto del microfono. L'indicazione di funzionamento passa da verde a rosso e sente due brevi toni bip. Faccia attenzione che l'apertura laterale del microfono non sia coperta. Si percepiscono i suoni ambientali e si può utilizzare il ricevitore quale amplificatore per poter comprendere meglio il proprio interlocutore.

Per spegnere il microfono preme nuovamente il tasto. L'indicazione di funzionamento passa nuovamente al verde e Lei sente un tono della Sua TV e/o della Sua radio o simile.

Impostazione della comprensione linguistica

Può impostare la comprensione linguistica sull'emittente. Premendo diverse volte il tasto (vedi immagine) lampeggiano i LED di visualizzazione 1, 2, 3 o nessuno.

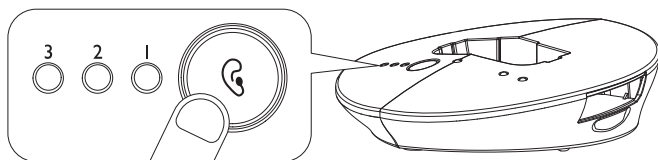

La seguente tabella mostra le possibili impostazioni. Provi quale impostazione preferisce.

Impostazione	Visualizzazione LED (arancione)	effetto
Standard		Neutrale
1		Alzamento bassi + alzamento toni alti
2		Alzamento toni alti
3		Alzamento bassi

Interruttore stereo/mono sull'emittente

La riproduzione sul ricevitore è sempre mono, anche nel caso in cui il segnale d'uscita della fonte sia stereo. Qualora entrambi i canali stereo vengano riprodotti allo stesso modo, impostare l'interruttore sull'emittente in posizione "mono" (impostazione consigliata). Se si desidera, invece, ascoltare solo uno dei due canali stereo, impostare l'interruttore sull'emittente in posizione "stereo" e regolare la riproduzione con il regolatore di bilanciamento che si trova sul ricevitore.

Ricerca errori

Nessun tono

- Controlli il collegamento corretto dell'emittente alla rete elettrica (adattatore presa – collegamento con l'emittente).
- Controllare l'interruttore sul ricevitore (posizione ON).
- Può darsi che la batteria nel ricevitore sia scarica. Mettere il ricevitore in carica sulla stazione di ricarica nell'emittente o sostituire la batteria ricaricabile con quella di riserva (carica).
- Controlli se l'apparecchio dal quale desidera sentire il tono (radio, televisore, ecc.) è veramente acceso e se attualmente è veramente impostato un'emittente/un canale che trasmette il tono.
- Se riprende il segnale del tono per l'emittente da un collegamento cuffia sulla radio / sul lettore CD ecc., La preghiamo di controllare se questa uscita viene comandata per mezzo di un regolatore del volume. Eventualmente aumenti questo volume di partenza.
- Il volume impostato sul ricevitore è troppo basso. Impostare un volume più alto.
- Provare un altro collegamento (RCA, SCART o CUFFIA) oppure utilizzare il microfono fornito.

Rumori di interferenza

- Può darsi che la batteria nel ricevitore sia scarica. Mettere il ricevitore in carica sulla stazione di ricarica nell'emittente o sostituire la batteria ricaricabile con quella di riserva (carica).
- Può darsi che la distanza del ricevitore dall'emittente sia troppo elevata. Provi se la quali migliora se si trova più vicina/o all'emittente.
- Se riprende il segnale del tono per l'emittente da un collegamento cuffia sulla radio / sul lettore CD ecc., La preghiamo di controllare se questa uscita viene comandata attraverso un regolatore del volume. Eventualmente aumenti il volume di partenza.
- Può darsi che il segnale di ingresso sia troppo alto. Ridurre il volume del segnale di ingresso.

Appendice

Appendice

Istruzioni di sicurezza

Legga queste istruzioni d'uso con attenzione e Le conservi per bene.

Uso corretto

Questo apparecchio è stato sviluppato per trasmettere segnali acustici di un televisore o impianto HiFi dalla trasmittente a un ricevitore via luce infrarossa senza cavi. Ogni altro tipo d'uso non è corretto.

Modifiche o ristrutturazioni autonome non sono ammesse. Non apra in nessun caso l'apparecchio e non faccia tentativi propri di riparazione.

Luogo di posizionamento e informazioni di sicurezza

- Eviti sollecitazioni da fumo, polvere, urti, sostanze chimiche, umidità, calore o insolazione diretta.
- Visto che i mobili di oggi sono coperti di strati variegati di lacca e materiali sintetici e vengono trattati con diversi mezzi di cura, non si può escludere che alcune di queste sostanze intacchino o immorbidiscano i piedini di plastica dell'apparecchio. I piedini dell'apparecchio modificati in questo modo possono lasciare tracce spiacevoli sulla superficie dei mobili. Per questo per il Suo apparecchio La preghiamo di usare un sottofondo anti-sdrucchiolo.
- Il ricevitore è in grado di riprodurre volumi altissimi. Non esporsi costantemente ad un volume elevato. Impostare inizialmente un volume basso sul ricevitore e aumentarlo poi in base alle proprie esigenze.

Utenti con pacemaker

Se porta un pacemaker, dovrebbe consultare il Suo medico prima di utilizzare questo prodotto. L'apparecchio deve essere spento immediatamente se percepisce qualsiasi tipo di limitazione o lo supponga.

Adattatore

Attenzione: Utilizzi solo l'adattatore fornito visto che altri adattatori potrebbero danneggiare la trasmittente. Non deve bloccare l'accesso all'adattatore per mezzo di mobili o altri oggetti.

Durante il funzionamento faccia attenzione alle condizioni perfette del cavo e della presa. Cavi curvati o sfregati sono pericolosissimi!

L'adattatore contenuto nel volume di consegna corrisponde ai requisiti del design ecologico dell'UE per i prodotti a funzionamento elettrico (direttiva

CEE 32 del 2005). Il consumo energetico per questo è notevolmente ridotto sia in condizioni di funzionamento che di disponibilità rispetto agli adattatori di modelli più vecchi.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Batterie

Attenzione: Non getti le batterie ricaricabili o le batterie nel fuoco. Utilizzi esclusivamente le batterie ricaricabili previste per l'apparecchio! Faccia attenzione alla polarità corretta!

Smaltimento

Se desidera smaltire il Suo apparecchio, lo porti al punto di raccolta del Suo gestore comunale di smaltimento (ad es. punto di raccolta di materiali di valore). Secondo la legge delle apparecchiature elettriche e elettroniche i proprietari di apparecchi usati hanno l'obbligo legale di smaltire separatamente le apparecchiature elettriche e elettroniche usate. Il simbolo qui a lato indica che l'apparecchio non deve assolutamente essere smaltito nei rifiuti domestici!



Pericolo per la salute e l'ambiente causato da accumulatori e

batterie! Non aprire, danneggiare, ingerire o emettere nell'ambiente in nessun caso accumulatori e batterie. Potrebbero contenere metalli pesanti velenosi e dannosi per l'ambiente. Ha un obbligo per legge di smaltire in modo sicuro accumulatori e batterie presso rivenditori di batterie e presso punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. Lo smaltimento è a titolo gratuito.



I simboli a lati indicano che gli accumulatori e le batterie non devono assolutamente essere gettate nei rifiuti domestici e che devono essere consegnati presso i punti di raccolta addetti allo smaltimento.

I materiali d'imballaggio deve smaltirli secondo le prescrizioni locali.

Se dovessero esserci dei problemi

Se dovesse avere dei problemi con il Suo apparecchio, controlli prima gli avvisi a pagina 46. In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra Service Hotline. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet

www.amplicomms.com

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.

Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio corrisponde ai requisiti della direttiva UE:



Direttiva UE 1999 / 5 riguardante gli impianti radio e le installazioni di telecomunicazione e il riconoscimento reciproco della loro conformità.

La conformità con la direttiva sopra citata viene confermata con il simbolo CE sull'apparecchio. La dichiarazione di conformità completa la puo scaricare gratuitamente dal nostro sito web allo **www.amplicomms.com**

Manutenzione

- Pulisca la superficie dell'apparecchio sempre con una pezza morbida e priva di peluzzi.
- Non utilizzi mai detergenti e solventi.

Dati tecnici

Trasmissione	Digital hopping
Frequenza	2,4 GHz ISM Band
Portata	fino a 25 m (in condizioni ideali)
Ambito di frequenza	30 Hz - 20 kHz
Volume massimo	120 dB
Fattore di vibrazione	< 0,5 %
Segnale/distanza brusio	> 75 dB
Approvvigionamento elettrico (trasmittente)	Adattatore, output: 5 VDC, 550 mA
Approvvigionamento elettrico (ricevitore)	1 batterie 3,7 V / 350 mA Lithium Polymer
Durata di funzionamento	Con batterie cariche fino a 5 ore
Durata di ricarica	Per batterie vuote ca. 3 ore
Peso	Trasmittente: ca. 115 g Ricevitore: ca. 78 g

Garanzia

Gli apparecchi di AMPLICOMMS vengono prodotti e controllati secondo le procedure di produzione più innovative. L'uso di materiali selezionati con attenzione e di tecnologie altamente sviluppate garantisce un funzionamento privo di disturbi e un ciclo di vita lungo. Le condizioni di garanzia non si applicano se la causa del disturbo nell'apparecchio va ricondotta al gestore della rete telefonica o a un eventuale impianto secondario interconnesso.

La garanzia non si applica alle batterie ricaricabili, gli accumulatori o i pacchetti di batterie impiegate nei prodotti. La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto.

All'interno del periodo di garanzia tutte le carenze riconducibili a errori di materiale o di produzione vengono eliminate gratuitamente. Il diritto di garanzia si estingue dopo interventi del compratore o di terzi. Danni causati da uso o maneggio scorretti, posizionamento o conservazione errati, collegamenti scorretti o installazione errata, forza maggiore o altri influssi esterni non sono contenuti nella prestazione di garanzia.

Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire parti difettose in caso di reclami e/o di mettere a disposizione un apparecchio sostitutivo. Parti o apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

Dritti di risarcimento danni sono esclusi almeno che al produttore non si dimostri di aver agito con premeditazione e grave negligenza.

Se il Suo apparecchio dovesse evidenziare un difetto durante il periodo di garanzia, La preghiamo di rivolgersi al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio AMPLICOMMS, presentando il Suo scontrino di acquisto. Tutti i diritti di garanzia secondo queste normative sono da far valere esclusivamente presso il rivenditore specializzato.

Due anni dopo l'acquisto dei prodotti non si possono più far valere diritti di garanzia.

Note



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

02/2013 – Ausgabe 1.0

